




Przygotowanie Pacjentki do badania cytologicznego:

1. Badanie wykonuje się pomiędzy 10-20 dniem cyklu miesięczkowego (można je wykonać praktycznie każdego dnia poza miesiączką, ale nie wcześniej niż 2 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem).
1. Do higieny intymnej należy używać płynów o kwaśnym pH, gdyż mydło posiada silny zasadowy odczyn, co może zmieniać fizjologiczną florę bakteryjną pochwy.
2. Nie należy wykonywać irygacji przed badaniem, ani nie zakładać tamponów.
3. Leki dopochwowe należy odstawić na 6 dni przed wykonaniem badania.
4. Przerwa od stosunku płciowego powinna wynosić co najmniej 24 godziny.
5. Odczekać co najmniej 24 godziny po badaniu ginekologicznym, czy badaniu USG dopochwowym.

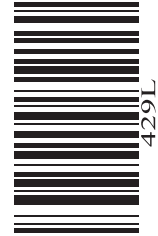

JAK POSTĘPOWAĆ Z MATERIAŁEM DO BADANIA:

Cytologia ginekologiczna - wymaz (bad. 131)	Cytologia ginekologiczna - LBC zawiesina komórek (bad. 136,3196, 5042, 5043, 5044, 5046)
<p>1. Preparat cytologiczny musi być podpisany - (na matowej części ołówkiem) numerem zgodnym z numerem materiału na zleceniu.</p>  <p>2. Rozmaz należy pobrać przy użyciu wziernika, materiał do badania z szyjki macicy - szczoteczką, natomiast materiał z tarczy szyjki macicy - szpatułką</p> <p>3. Materiał przenosić jak najszybciej na szkiełko podstawowe, zgodnie z poniższym schematem</p>  <p>4. Natychmiast utwalić odpowiednim preparatem np. Cytofix</p> <p>5. Wysuszony preparat umieścić w pudełku do transportu. Preparaty nie mogą stykać się powierzchniami, powinny być separowane w przegrodach pojemnika. Badania należy dostarczyć do laboratorium wraz ze zleceniem opatrzonym odpowiednimi kodami.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Wymaz pobierać za pomocą szczoteczki Rovers® Cervex-Brush®.2. Wprowadzić włosie środkowej części główki szczoteczki do kanału szyjki macicy na taką głębokość, aby krótsze włosie dotknęło tarczy części pochwowej szyjki macicy, utrzymując nacisk obracać szczoteczkę pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.3. Ostrożnie wyciągać szczoteczkę (uważać, by włosiem szczoteczki nie dotknąć zewnętrznej powierzchni probówki lub żadnego innego przedmiotu).4. Odkręcać pojemnik i natychmiast umieścić w nim szczoteczkę w taki sposób, by włosie było zanurzone w buforze, przycisnąć 10x do dna pojemnika, aby włoski uległy rozdzielaniu następnie odłamać główkę szczoteczki i zostawić w pojemniczku.5. Zamknąć szczelnie pojemnik, tak aby linia gwintu na butelce pokrywała się z linią gwintu na zakrętku.6. Pojemnik okleić kodem i opisać imieniem i nazwiskiem.